

Q7 PLUS – 3 SOORTEN AANSLUITMETHODEN

Modelnummer: Q7 PLUS



BELANGRIJKE INFORMATIE – LEES DIT EERST

Lees en volg alle instructies in deze handleiding voordat u uw aandrijfunit voor de eerste keer gebruikt.

Als u iets in deze handleiding niet begrijpt of extra hulp nodig heeft bij de installatie, neem dan contact op met Care2move mobility .

Het veilig gebruiken van uw product hangt af van het zorgvuldig opvolgen van de waarschuwingen en instructies in deze handleiding. Het hangt ook af van uw eigen gezond verstand en dat van uw leverancier, verzorger of zorgprofessional.

Care2move Mobility is niet verantwoordelijk voor letsel en/of schade die ontstaat door:

- het niet opvolgen van de instructies,
- onjuist gebruik,
- gebrek aan gezond verstand.

Symbolen in deze handleiding

Waarschuwing!

Het niet opvolgen van waarschuwingen kan leiden tot schade aan de Q7 PLUS en persoonlijk letsel.

Waarschuwing!

Wisking aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade veroorzaakt door het gebruik van dit product.

Let op!

Attendeert de gebruiker op situaties die schade aan de Q7 PLUS kunnen veroorzaken.

INHOUDSOPGAVE

- I. Introductie
 - II. Productstructuur en technische gegevens
 - III. Uw aandrijfunit
 - IV. Installatiemethoden
 - V. Batterijen en opladen
 - VI. Onderhoud
 - VII. Belangrijke veiligheidsinstructies tijdens het rijden
 - VIII. Garantie
-

I. INTRODUCTIE

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Q7 PLUS aandrijfunit.

Het ontwerp combineert geavanceerde technologie met een moderne en aantrekkelijke vormgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruiksgemak en de betrouwbare werking uw dagelijkse mobiliteit aanzienlijk zullen verbeteren.

Uw veiligheid staat voorop. Lees deze handleiding volledig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

Wisking is niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van:

- onveilig gebruik,
- het niet opvolgen van instructies,
- het niet naleven van aanbevelingen in deze of andere documentatie.

Wisking behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Bedrijfsgegevens:

Care2move Mobility

Grotestraat 114 7471 BS Goor

Website: www.care2movemobility.nl

II. PRODUCTSTRUCTUUR EN TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluitmogelijkheden

		
Normale middenaansluiting	snelle aansluiting	speedy-aansluiting
Opvouwbare rolstoelen	Vaste (rigide) rolstoelen	Rigide rolstoelen met twee buizen

Technische specificaties

Band: 14 inch

Batterij: 36V / 13Ah Li-ion

Maximale snelheid: 25 km/u

Actieradius: 25 ± 5 km (afhankelijk van gewicht, terrein, helling, wind, rolstoeltype enz.)

Motor: 400W

Gewicht: 8,1 kg (exclusief batterij en aansluitdeel)

Kleine technische verschillen kunnen voorkomen door productupdates.

III. UW AANDRIJFUNIT

1. Kopgedeelte (Head)



1. Claxonknop
2. 3,1 inch kleurendisplay
3. Gashendel
4. Geïntegreerde waterdichte bedieningsknoppen

Functie van de knoppen

AAN/UIT-knop

3 seconden ingedrukt houden om in of uit te schakelen.

+ knop

- Kort drukken: versnelling verhogen
- Lang indrukken: koplamp aan/uit

– knop


- Kort drukken: versnelling verlagen
- Lang indrukken: achteruitmodus

Menu-instellingen

Druk + en – tegelijk in om het instellingenmenu te openen.



2. 3,1 inch Kleurendisplay

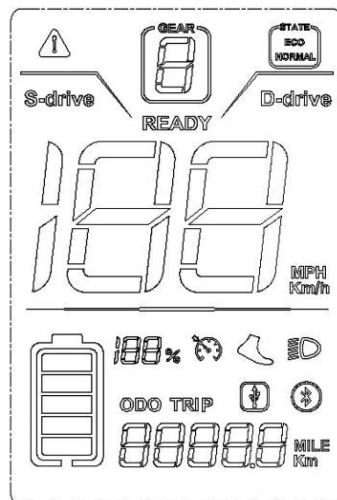

	Snelheid (tot 199 km/u weergavebereik)
	Batterijniveau (percentage)
	Dagafstand (gereden aantal kilometers)
	Versnellingen: P: achteruit 1: lage snelheid 2: gemiddelde snelheid 3: maximale snelheid
	Foutmeldingen

Foutcodes

ERRO 1 – Motorfout
ERRO 2 – Gashendelfout
ERRO 3 – Controllerfout
ERRO 4 – Remfout
ERRO 5 – Laagspanningsbeveiliging
ERRO 6/7 – Verbindingsfout

Hoekverstelling van het stuur



1. Draai de inbusbout (5) los
 2. Stel de gewenste hoek in
 3. Draai de inbusbout (5) vast
-

IV. INSTALLATIE



1. Installatie van het kopgedeelte



Plaats de steunbuis




Zet het stuur recht en draai de schroeven vast




Plaats de batterij tot u een "klik" hoort

2. Installatie van aansluitdelen

A Normale middenaansluiting (vouwstoel)

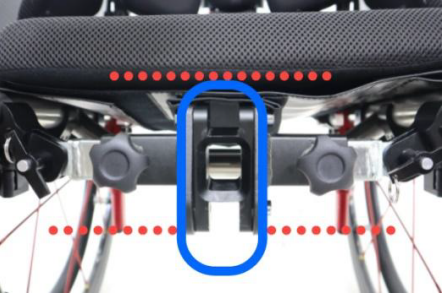 	Borgbuizen plaatsen door middel van het vastschroeven van de M5 inbusbouts er goed op letten dat beide kanten horizontaal staan
	Snelspanner monteren
	snelspanner uitlijnen in het midden
	Centrale buis in ontvanger monteren

Afstellen van haak

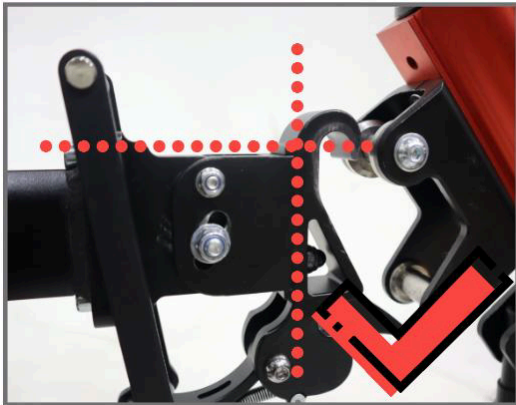

1. Het midden van de haak moet ongeveer 5 mm hoger zijn dan de haakkolom.

2. De hoek van de haakkop moet loodrecht op de grond staan.



Hoogte verstelling

Gebruik de inbussleutel om de 2 schroeven aan beide zijden

van de vierkante aansluiting los te draaien, beweeg ze omhoog en omlaag naar de

juiste positie en draai ze vast.

Hoekteverstelling van de haakkop

Gebruik de inbussleutel en steeksleutel om de 4 schroeven


op de afbeelding los te draaien.

Bevestig eerst de voorkant van de rolstoel, draai vervolgens

omhoog en omlaag, controleer de hoogte van het voorwiel


boven de grond tot de juiste positie en

draai de schroeven vast.

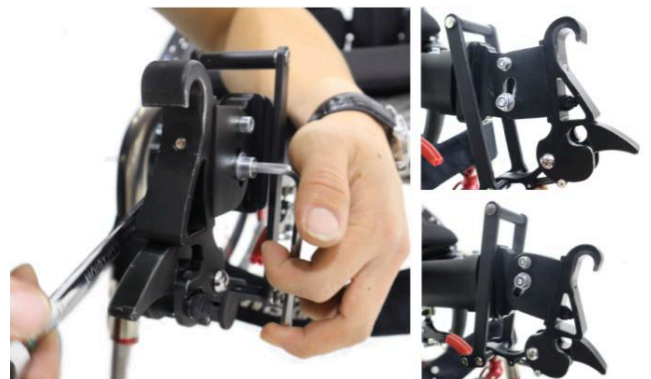

Belangrijk: Alle schroeven moeten vastzitten voor vertrek.

B. Nieuwe snelle aansluiting

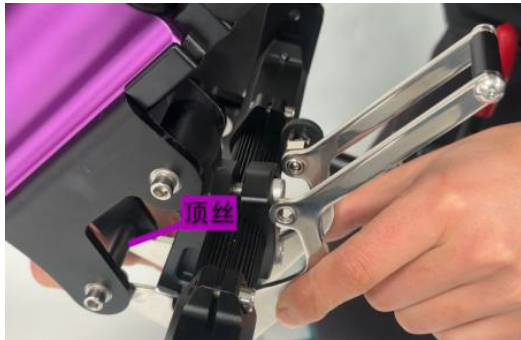


STAP 1: Het verbindingsstuk raakt lichtjes de bovenste draad, maar haakt niet vast.




STAP 2: Gebruik een inbussleutel om de 4 schroeven waarmee de klem vast zit los te draaien.




STAP 3: Gebruik de inbussleutel en moersleutel om de 4 schroeven rond los te draaien.

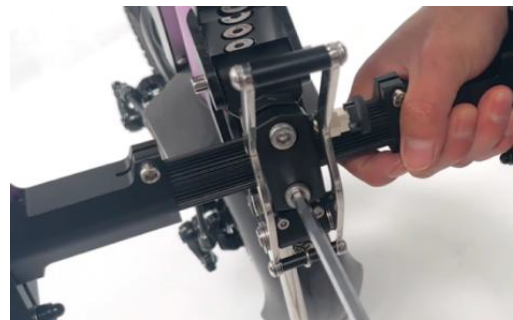

STAP 4: Gebruik een inbussleutel om de twee schroeven in het midden los te draaien

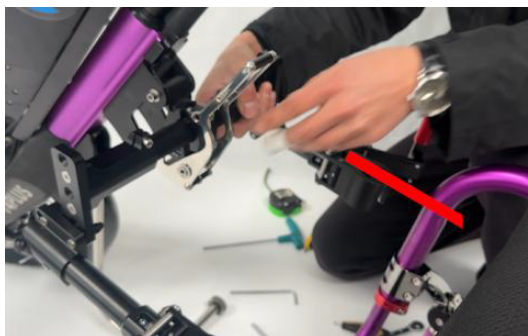


STAP 5: Nadat u de rolstoel met de brugbuis waterpas hebt gezet, draait u de schroeven bij de ratel vast en zorgt u ervoor dat de ratel in de middelste stand staat.

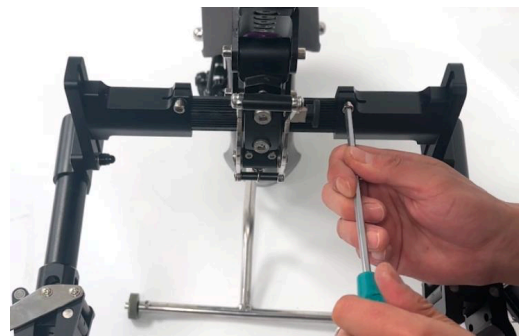

STAP 6: Gebruik een #5 inbussleutel om de twee schroeven bij G en H los te draaien.



STAP 7: Verbind het verbindingsstuk met de rolstoelbuis, zorg voor voldoende breedte, de positie van de brugbuis moet in dezelfde horizontale positie zijn.

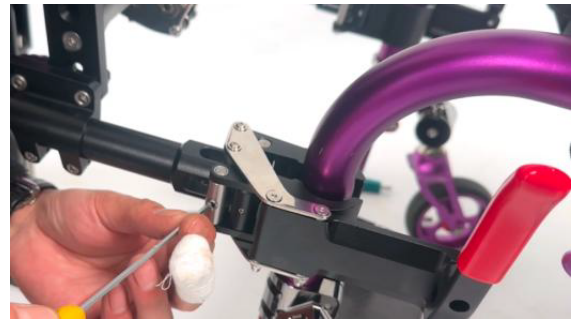

STAP 8: Let op de mate van aansluiting (strakheid) van de klem en de brugbuis. Als deze te los of te strak zit, kan de zeskant naar binnen of naar buiten worden gedraaid.



STAP 9: Gebruik een liniaal om te meten of de ratelafmetingen aan beide zijden hetzelfde zijn en draai de 2 schroeven bij vast nadat ze consistent zijn.



STAP 10: Pas de afstand tussen de onderarm en de rolstoel aan. Nadat u met een liniaal aan beide zijden dezelfde afstand hebt gemeten, kunt u de schroeven vastdraaien




STAP 11: Alle schroeven zijn vastgedraaid, het is afgesteld, u kunt de voorkant optillen, u hoort een "klik" als de kaart erin zit.



STAP 12: Nadat de Q7plus op zijn plaats zit, trekt u de veiligheidsspen naar de vergrendelde stand om de vergrendeling in te stellen voor tijdens het rijden .



STAP 13: Controleer na de installatie de hoogte van het voorwiel vanaf de grond. Ongeveer 3 cm is geschikt.

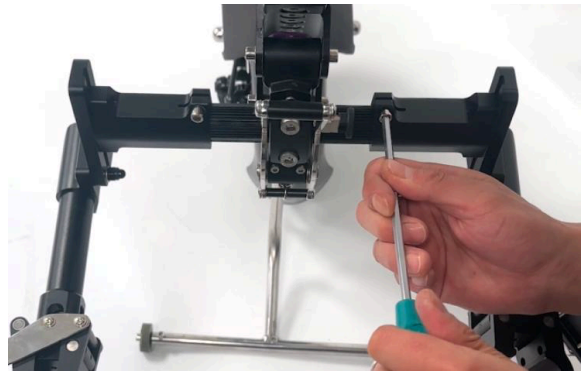

STAP 14: Om de grond hoogte van het voorste tandwiel aan te passen, draait u de ratel in stap 4.

C. Nieuwe speedy-aansluiting



STAP 1: Draai de schroeven van de voorste en achterste bevestigingsdelen los. De schroef A wordt losgedraaid zodat deze beweegbaar is.



STAP 2: Bepaal de hartafstand tussen de twee balken van de rolstoel om ervoor te zorgen dat de afstand tussen de rolstoelverbindingsdelen correct is.



STAP 3: Gebruik een inbussleutel om het achterste deel vast te schroeven, dat hier vooraf is geïnstalleerd. Draai ze niet te vast.



STAP 4: Gebruik een inbussleutel om de voorste bevestigingsdelen vast te schroeven, die hier vooraf zijn geïnstalleerd. Draai ze niet te vast.



STAP 5: Meet na de voorinstallatie met een liniaal de afstand tussen het achterste omvattende deel en de balk, en zorg ervoor dat het achterste omvattende deel in het midden staat. Draai afwisselend 4 schroeven vast, maar draai de schroeven hier nog niet vast.



STAP 6: Hang het verbindingsgedeelte van de rolstoel en het voorste omhelzingsgedeelte op en controleer op dit moment de hoogte van het voorwiel van de rolstoel. Omdat de voorste omhelzing in stap 4 niet strak zit, kan de hoogte van het voorwiel direct worden aangepast door te drukken of op te tillen.




STAP 7: Als de voorste tandwielheffing niet kan worden aangepast in stap 6, pas dan de gaten bij de schroeven aan waarnaar wordt verwezen in A.



STAP 8: De hoogte van het voorwiel boven de grond is ongeveer 3-4 cm. Nadat u de hoogte hebt bepaald, draait u de schroeven op alle verbindingen van de rolstoel vast. Dit omvat de 8 schroeven op de voorste en achterste beugels en de schroeven onder de stoel



STAP 9: Maak het verbindingmechanisme los, plaats het rolstoel verbindingdeel en het voorste verbindingdeel samen, controleer de positie van de vergrendelingsas de geleideplaat. De juiste positie is: de geleide plaat is ongeveer 5 mm hoger dan de vergrendelings as. Als dit niet het geval is, voer dan stap 10 en 11 uit om de positie aan te passen.

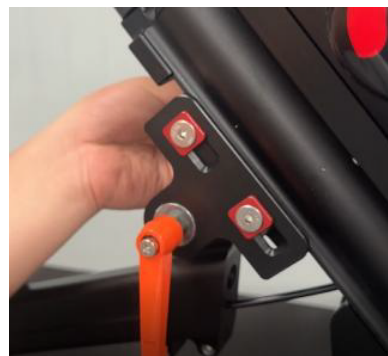

STAP 10: Draai bijbehorende schroeven op het hoogte verstel gedeelte los, in totaal 4, zodat u het voorste verbindingmechanisme omhoog en omlaag kunt bewegen, stel het af op de juiste positie en draai deze 4 schroeven vast.



STAP 11: Als stap 10 niet voldoende is, pas dan de pootgaten aan. De installatie is voltooid wanneer de positie correct is aangepast.

V. BATTERIJEN EN OPLADEN

Type: Lithium
Spanning: 36V
Capaciteit: 13/16Ah

Batterij verwijderen

1. Uitschakelen
2. Sleutel openen
3. Batterij eruit schuiven



Opladen

1. Oplader aansluiten op batterij
2. Stekker in stopcontact (110V/220V)
3. Rood = laden
4. Groen = volledig geladen

Aanbevolen laadtijd: 6–10 uur (maximaal 12 uur)

Belangrijke waarschuwingen

- Alleen originele oplader gebruiken
- Niet 's nachts opladen
- Niet onbeheerd opladen
- Niet binnenshuis opladen
- Geen niet-originele batterijen gebruiken
- Geen parallelle batterijsystemen zonder fabriekstoestemming



VI. ONDERHOUD

Wekelijks:

- Remmen controleren
- Schroeven controleren

Maandelijks:

- Slijtage controleren
- Schoonmaken

Niet:

- Afspuiten met hogedrukreiniging
- Chemische reinigingsmiddelen gebruiken

Opslag:

- Droog bewaren
 - Batterij verwijderen bij langdurige opslag
-

VII. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Oefen eerst in open ruimte
 2. Rijd volgens verkeersregels
 3. Vermijd hoge snelheid in bochten
 4. Max. 2 km/u bij draaien
 5. Niet gebruiken in regen
 6. Niet gebruiken in liften of zeer krappe ruimtes
 7. Zet altijd uit wanneer niet in gebruik
 8. Controleer alle bevestigingen voor vertrek
-

VIII. GARANTIE

Garantie (1 jaar):

- Hoofdframe
- Aandrijfsysteem
- Oplader
- Wielen
- Batterij (geen dekking bij capaciteitsverlies door verkeerd opladen)

Geen garantie bij:

- Waterschade
- Eigen modificaties
- Onjuist gebruik
- Commercieel gebruik
- Overbelasting

Voor garantie is het serienummer verplicht.